

Implantes testiculares

Rellenos de gel de silicona o de elastómero de silicona suave, con tapa reforzada o con aguja guía, disponibles en cinco tamaños

POLYTECH



Implantes testiculares

Descripción del producto

Los implantes testiculares están disponibles en dos modelos diferentes, ambos están adecuados para la sujeción al tejido.

Los implantes rellenos de gel de silicona tienen un fragmento corto de teflón removible para guiar la aguja y evitar la perforación del implante.

Los implantes rellenos de elastómero de silicona suave tienen una tapa reforzada que permite la fijación del implante con la sutura a través de la tapa.

Ambos tipos están disponibles en cinco tamaños diferentes.

Información del producto

La cubierta multicapa de los implantes testiculares está equipada con una capa de barrera y tiene una superficie lisa POLYsmooth™.

Los implantes están rellenos de un gel de silicona altamente reticulado (Shapar Gel™) o de un elastómero de silicona suave.

La producción de los implantes se basa en una gestión de calidad según lo establece la norma ISO 13485. Todos los materiales utilizados son de calidad médica implantable.

Indicaciones

- Reconstrucción después de la orquidectomía
- Reconstrucción después de un traumatismo
- Defectos congénitos
- Reemplazo del implante

Información importante

Los implantes testiculares se entregan embalados individualmente y estériles.

Precaución

La guía de la aguja de teflón de los implantes rellenos con gel de silicona siempre debe ser removida antes del cierre de la herida!

ATENCIÓN: Tenga en cuenta las instrucciones de uso de manera detallada que se incluyen con cada producto.



Implantes testiculares CE 0483

POLYsmooth™


Embalados individualmente, esterilizado

Orden N°	Dimensiones (cm)		Volumen (ml)
	A	B	


Rellenos con gel de silicona

Con aguja guía

10100-005	2.0	2.2	5
10100-012	2.6	3.3	12
10100-021	3.2	4.2	21
10100-027	3.3	4.8	27
10100-036	3.9	5.0	36

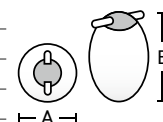

Medidas aproximadas

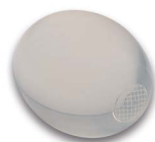

Implantes testiculares CE 0483

POLYsmooth™


Embalados individualmente, esterilizado

Orden N°	Dimensiones (cm)		Volumen (ml)
	A	B	

Rellenos de elastómero de silicona suave

Con tapa reforzada

10101-005	2.0	2.2	5
10101-012	2.6	3.3	12
10101-021	3.2	4.2	21
10101-027	3.3	4.8	27
10101-036 ¹	3.9	5.0	36

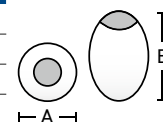

Medidas aproximadas

¹Entrega ≈ 8-10 semanas después de la orden